

# 医薬・医療機器用バーコードのフォーマットをチェック かんたんチェッカ 医薬・医療機器版



業務用モバイル端末 HF550X

かんたんチェッカは、業務用モバイル端末のバーコードリーダーを使い、医薬・医療機器用のバーコードが正しく作成されているかを簡単に確認することができるチェックツール。正しいバーコードを表示することで製品の取り違え事故防止やトレーサビリティの確保、流通の効率化などに寄与します。対応する業務用モバイル端末(HF550X)とアプリケーションをセットでご提供いたします。

## ◆ 優れた操作性

モバイル端末をバーコードに向けトリガーボタンを押すだけで簡単にバーコードを読み取りチェックすることができます。

## ◆ データフォーマットを確認

商品コード(GTIN)、バッチまたはロット番号、製造年月日、有効期限日、シリアル番号などが法令で定めた医薬品・医療機器用バーコードの要件に沿って作られているかをチェック。間違いがあればその内容を画面で警告します。

## ◆ 検査履歴管理


検査日時と結果はすべて保存され、検査の履歴管理が可能です。履歴からNGデータを検索したり、パソコンにUSBでデータ転送することもできます。

## ◆ テスト読取


JAN/UPC, ITF, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Composite, Codabar, Code39, Code128, QR Code, DataMatrix, PDF417など、様々なバーコードの読取テストができます。

主に使用するGS1 アプリケーション識別子(AI)

AI	内容	フォーマット	医療機器	医薬品
01	商品識別コード(GTIN)	n2+n14	○	○
10	バッチまたはロット番号	(n2+an..20)	○	○
11	製造年月日(YMMMDD)	n2+n6	○	-
17	有効期限日(YMMMDD)	n2+n6	○	○
21	シリアル番号	(n2+an..20)	○	○
30	数量	(n2+n...8)	○	○
7003	有効期限(日時分) (YYMMDDhhmm)	(n4+n10)	-	○

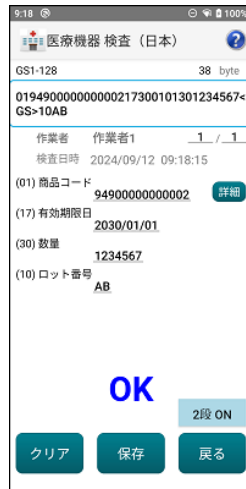

OK判定画面

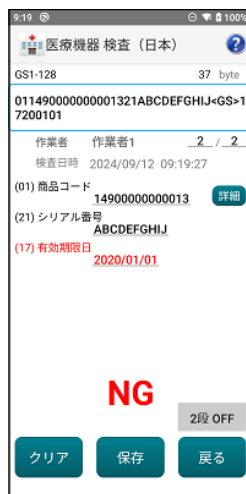

NG判定画面



NG理由画面

Auto-ID, Network and Integration

**Ainix** アイニックス株式会社  
AINIX Corporation

本社 〒153-0044 東京都目黒区大橋1-6-2 池尻大橋ビルディング  
TEL (03)5728-7576 FAX (03)5728-7510

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-22-20 川丸ビル 4F  
TEL (06)6838-3071 FAX (06)6838-3117

名古屋営業所 〒461-0011 愛知県名古屋市中区白壁1-45 白壁ビル 10E号室  
TEL (052)950-7510 FAX (052)950-7570



<https://www.ainix.co.jp/>